

turn **all**® system

Automatisoitu kylkiasentojärjestelmä



Levabo®
making a move in
the right direction



- Automaattinen kylkiasentojärjestelmä 0-30° kääntöön painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon.
- Kattava helpotus painetta, paineentunnetta sekä painehaavoja vastaan.
- Voidaan integroida mihin tahansa sänkyyn, jossa on irrotettava patja.
- Aikaa säästävä, enemmän hoitoaikaa potilaalle.
- Mukavan tuntuinen, ei häiritse nukkumista.
- Lievä patjan automaattinen kohoaminen varsinaisen nostopuolen vastapuolelta tukee asentoa sekä estää potilaan liukumisen.



LEVABO®

Turn All® järjestelmä muuttaa tavallisen sängyn automaattisesti kylkiasentoon kääntäväksi sängyksi.

Uusi Levabo Turn All® kylkiasentojärjestelmä on kehitetty sairaalaloihin ja kotioloihin.

Järjestelmän tarkoitus on tukea ja auttaa henkilökuntaa vuodepotilaiden kääntämisessä, joilla on kohonnut riski saada painehaavoja tai joilla on jo olemassa olevia painehaavoja.



Kliininen näyttö

Kliiniseen näyttöön perustuvat ohjeet suosittelivat potilaiden, joilla on rajoittunut liikkumiskyky, kääntämistä kahden tunnin välein (NICE GUIDLINE 2015). 2019 kansainväliset painehaavaohjeet (EPUAP, NPIAP, PPIA) suosittelivat 30° kylkiasentoa.

Helppokäyttöinen

- Helppo asentaa ja käyttää.
- "Päälle/pois painike"
- 3 x kääntösykliä joista valita: 30/30, 60/60 tai 90/90 minuuttia.
- Ajan asetustoiminto, jolla säädetään haluttu aika.
- CPR naru patjan nopeaa tyhjennystä varten.
- Järjestelmä ilmoittaa merkkiäänellä jos virta katkeaa.

Ohjauslaatikko, jossa on yksinkertainen käyttö



Sopii kaikkiin sänkyihin

Sopii kaikkiin sänkyihin, asetetaan olemassaolevan patjan alle. Voidaan käyttää painesäätöjen patjojen sekä säädettävien sänkyjen kanssa.

Johdonmukaista ja hallittua kääntymistä

Järjestelmä kääntää potilaan automaattisesti ja hiljaisesti, vähentäen manuaalisten käännösten tarvetta hoitajilta.


Sivutukijärjestelmä

Turn All® järjestelmässä on varsinaisen nostopuolen vastapuolella tukijärjestelmä

Tukijärjestelmä ehkäisee potilaan liukumisen.




turn all®

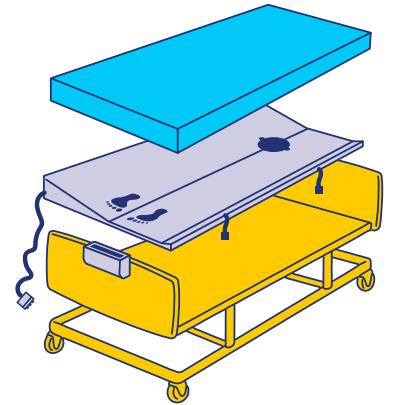

Skannaa koodi ja katso
kuinka helppoa Turn All®
asennetaan sänkyyn



Skannaa koodi ja lue monista
eduista, joita tarjoaa
automaattisesta
sivuttaissuuntaisesta
kääntämisestä

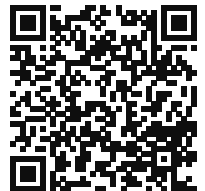

Turn All® -järjestelmä vapauttaa
hoitoresursseja



Turn All® järjestelmän hyödyt

- Kattava paineenlievitys
- Painehaavojen ennaltaehkäisyyn/hoitoon.
- Mukavan tuntuinen, eikä häiritse normaalia unta.
- Hiljainen käytettäessä.
- Soveltuu käytettäväksi ylipainoisilla, potilaita on helppo kääntää varoen ja
- laitteen käyttö suojelee myös henkilökunnan ergonomiamia ja terveyttä.
- Hellävarainen asennonteko myös potilaille, joilla on kipuja.
- Lievä patjan automaattinen kohoaminen varsinaisen nostopuolen vastapuolelta tukee asentoa sekä estää potilaan liukumisen.
- Aikaa säästäviä tuloksia, enemmän hoitoaikaa potilaille.
- Paranneltu materiaali huomioi hengittävyden sekä potilaan verenkierron.
- Tukeva, kestävä ja luotettava.
- Voidaan integroida mihin tahansa hoitosänkyyn, jossa on irrotettava patja.
- Yhtenäinen tuki päästä varpaisiin.
- Manuaalisen käsittelyn tarpeet vähenevät.

Turn All® tuotevalikoima

Tuotteen nimi	Koko senttimetreissä	Maksimi paino kiloissa	Tuotteen nro.	Käyttö
Turn All® monipotilaskäyttöinen 3C incl suojus, jossa TPU-muovi alaosa	200 x 85	225	70128	Järjestelmä, joka sisältää Turn All® nostopatjan, 1 Turn All® suojus, jossa PVC-muovi alaosa, sekä 1 pumppu 3 sykliä, 30/30, 60/60, 90/90 minuuttia
Turn All® suojus, jossa TPU alaosa	200 x 85	N/A	70114	Suojus Turn All® nostopatjalle, jossa TPU alaosa
Turn All pumppu 3C	10 x 13 x 27	N/A	76117	Pumppu Turn All® 3 -syklijärjestelmään 30/30, 60/60, 90/90 minuuttia

Bariatric

Turn All® monipotilaskäyttöinen 3C Bariatric incl suojus, jossa TPU-muovi alaosa	200 x 110	300	70098	Järjestelmä, joka sisältää Turn All® nostopatjan, 1 Turn All® suojus, jossa PVC-muovi alaosa, sekä 1 pumppu 3 sykliä, 30/30, 60/60, 90/90 minuuttia
Turn All® suojus Bariatric, jossa TPU alaosa	200 x 110	NA	70126	Suojus Turn All® nostopatjalle Bariatric, jossa TPU alaosa



Vaatimustenmukaisuuvakuutus (CE)

Yhtiö Levabo ApS, Sverigesvej 20A, 8660 Skanderborg, vakuuttaa, että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu teknisen dokumentaation ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Tuote

Turn All® aktiivinen lääketieteellinen tuote, joka täyttää EU:n säädökset MDR (EU) 2017/745, Lääketieteelliset laitteet - Luokka 1.

Tuotanto

EN ISO 9001: 2015 QMC
EN ISO 13 485: 2016 MD-QMC

Lisätietoja kattava Hoitokonsepti painehaavojen hoitoon

www.levabo.com

www.facebook.com/LevaboAps



LEVABO[®]
medical



Levabo Aps.
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Denmark
Tel. +45 31 70 40 25
E-mail: info@levabo.dk